



Biofilm

САЙТ ДОСТУПЕН ПО АДРЕСУ:

Analyzer

huggingface.co/bf-analyzer

[0] ИНТЕРФЕЙС САЙТА

НАСТРОЙКИ
ФИЛЬТРАЦИИ

 **Filtration settings**

Single bacteria area (px)

0

5000

0

5000

Single bacteria eccentricity

0.85

0.00

1.00

Biofilm area (%)

0

100

0

100

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

 **Workflow**

SEM-image wasn't uploaded

ИНСТРУМЕНТЫ

 **Tools**

Load image

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • BMP, PNG, JPG, JPEG

Browse files


 Start segmentation

☐ Show bacteria numbers

[1] ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

НАЖМИТЕ «BROWSE FILES».

ЗАГРУЗИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ.

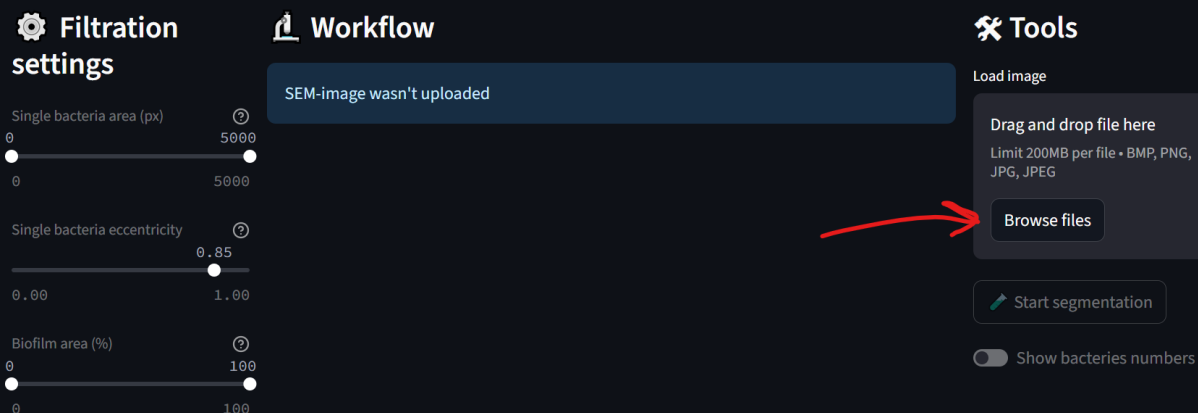

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЯВИТСЯ В РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ.

[2] ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКА «START SEGMENTATION» СТАНЕТ АКТИВНА. НАЖМИТЕ ЕЁ ДЛЯ ЗАПУСКА ОБРАБОТКИ

Filtration settings

Single bacteria area (px) ?
 0 5000
0 5000

Single bacteria eccentricity ?
 0.00 1.00
0.85

Biofilm area (%) ?
 0 100
0 100

Workflow



Loaded SEM-image 1-BSE-1k-T1.bmp

Tools

Load image

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • BMP, PNG, JPG, JPEG

Browse files

1-BSE-1k-T1.b...
4.7MB

Start segmentation

Show bacteria numbers

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ИНДИКАТОРОМ «IMAGE PROCESSING». ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ НЕАКТИВНЫМ (ТЕМНЕЕТ) В ЭТОТ МОМЕНТ


Filtration settings

Single bacteria area (px) ?
 0 5000
0 5000

Single bacteria eccentricity ?
 0.00 1.00
0.85

Biofilm area (%) ?
 0 100
0 100

Workflow

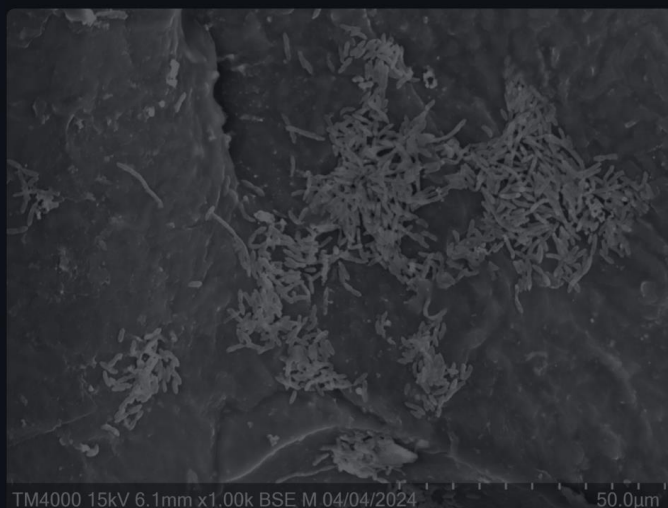

Loaded SEM-image 1-BSE-1k-T1.bmp

Tools

Load image

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • BMP, PNG, JPG, JPEG

Browse files

1-BSE-1k-T1.b...
4.7MB


Start segmentation

Show bacteria numbers

Image processing...

2% 1/54 [00:00<00:12, 4.14it/s]

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБРАБОТКИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОЯВИТСЯ ЦВЕТНАЯ МАСКА. **ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ** СООТВЕТСТВУЕТ БИОПЛЁНКЕ, **ФИОЛЕТОВЫЙ** – ОТДЕЛЬНЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ.

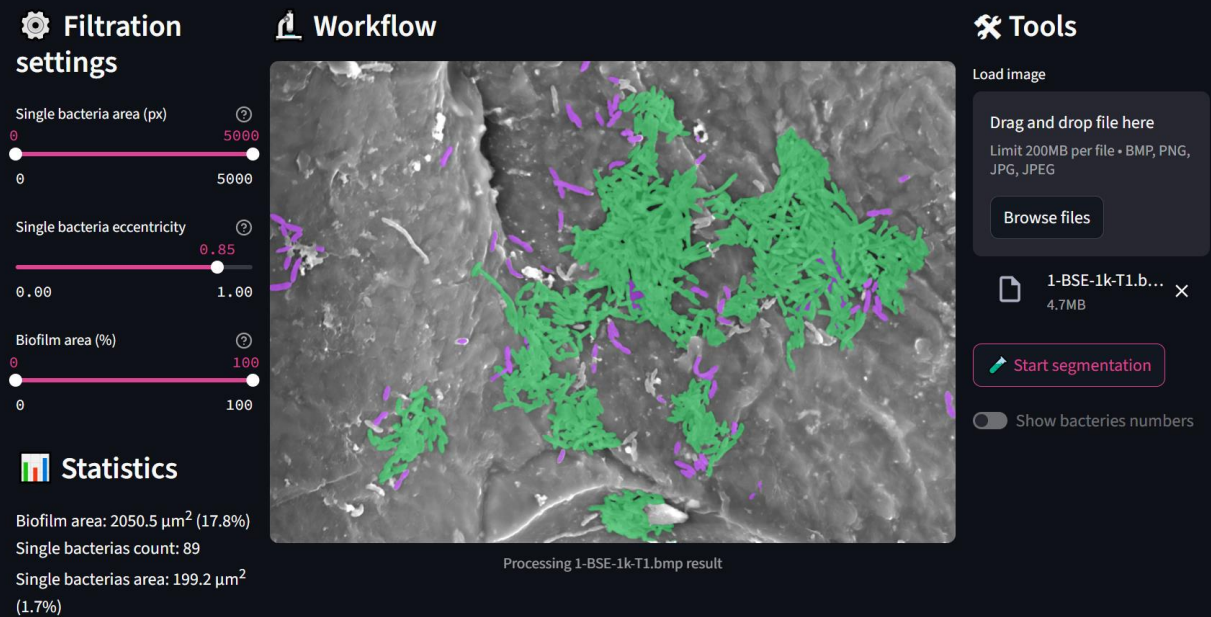


СЛЕВА ВНИЗУ ВЫВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ПЛОЩАДЬ БИОПЛЁНКИ В МКМ И % ОТ ПЛОЩАДИ ИЗОБРАЖЕНИЯ;
- КОЛИЧЕСТВО ОДИНОЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ;
- ПЛОЩАДЬ ОДИНОЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В МКМ И % ОТ ПЛОЩАДИ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

[3] РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКИ КАРТИНКИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ:

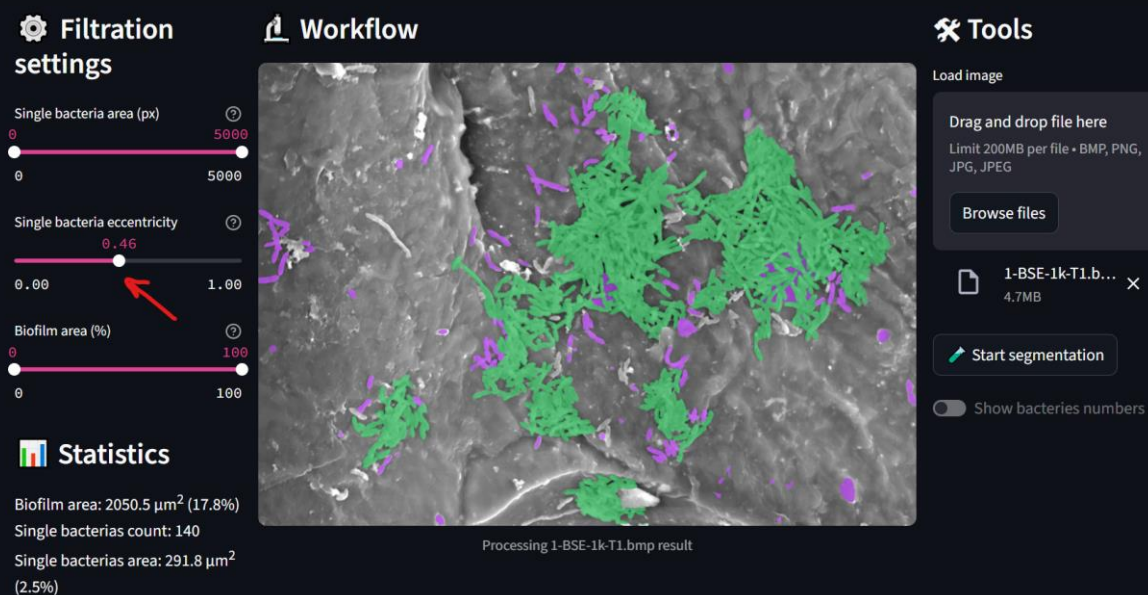

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ПОЛУЗНКА ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРАЦИИ МАСКИ БУДУТ ОТРИСОВАНЫ ЗАНОВО В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ.

[ВАЖНО !]

ПОКА ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕАКТИВНО (СТАЛО ТЁМНЫМ), ИДЁТ ОБРАБОТКА. В ЭТОТ МОМЕНТ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ НИКАКИЕ НАСТРОЙКИ – РЕЗУЛЬТАТ НЕ УСПЕЕТ ОТОБРАЗИТЬСЯ.

[4] СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТАЦИИ МОЖНО КАК ОБЫЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЯ ПРАВОЙ КНОПКИ МЫШИ ПО НЕМУ И ВЫБОРА ОПЦИИ СОХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

The screenshot displays a software interface for biofilm segmentation. It is divided into three main panels: **Filtration settings**, **Workflow**, and **Tools**.

- Filtration settings:** Contains three sliders for filtering results:
 - Single bacteria area (px):** Range from 0 to 5000, currently set at 5000.
 - Single bacteria eccentricity:** Range from 0.00 to 1.00, currently set at 0.46.
 - Biofilm area (%):** Range from 0 to 100, currently set at 100.
- Statistics:** Displays the following data:
 - Biofilm area: 2050.5 μm^2 (17.8%)
 - Single bacteria count: 140
 - Single bacteria area: 291.8 μm^2 (2.5%)
- Workflow:** Shows a central image of a biofilm with segmented bacteria in green and purple. Below the image, it says "Processing 1-BSE-1k-T1.bmp result".
- Tools:** Includes a "Load image" section with a "Browse files" button and a "Start segmentation" button. A file named "1-BSE-1k-T1.b..." (4.7MB) is listed.

A right-click context menu is open over the central image, offering the following options:

- Сохранить изображение как...
- Добавить картинку в закладки
- Копировать адрес изображения
- Копировать изображение
- Открыть изображение в новой вкладке
- Найти это изображение в Яндексе
- Пожаловаться на рекламу
- Исследовать элемент